

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mata-do-hydromasażu-allexclusive-p-203.html>



Mata do hydromasażu do wanny AllExclusive z ozonowaniem

Cena brutto **5 390,00 zł**

Cena netto **4 382,11 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-DF-MH-AIIE**

Opis produktu

Mata Ozonowa AllExclusive do Hydromasażu - Doskonały Relaks i Terapia w Zacisku Domowym



Mata ozonowa AllExclusive to produkt, który od lat cieszy się uznaniem użytkowników na całym świecie. Stworzona z myślą o relaksie i zdrowiu, łączy innowacyjne technologie z komfortem użytkowania, oferując hydromasaż na najwyższym poziomie. Dzięki licznym badaniom nad wpływem kąpeli perletkowych na zdrowie, **firma MAG FRENKEL** wdrożyła szereg usprawnień, które pozwalają jeszcze lepiej dopasować masaż do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Wyjątkowe Funkcje Maty do Hydromasażu AllExclusive:

- **100 punktów masujących** wyposażonych w 2500 mikrodysz, które generują masujące perłki powietrza. Możliwość wymiany dysz pozwala na dostosowanie masażu do wybranych stref ciała, takich jak plecy, uda, czy okolice kręgosłupa.
- **Wysoka wydajność** - mata generuje aż 700 tysięcy pęcherzyków powietrza na sekundę, co zapewnia intensywny masaż pobudzający krążenie, poprawiający metabolizm oraz wspomagający układ nerwowy.
- **Elastyczne, antybakteryjne tworzywo** - mata wykonana jest z przyjaznego dla skóry materiału, który dopasowuje się do ciała, zapewniając komfortową kąpiel. Dodatkowo, zdejmowane, jednoczesowe, miękkie siedzisko umożliwia relaks w pełni dostosowany do potrzeb użytkownika.
- **Program czyszczący z funkcją ozonowania** (w generatorze) - po zakończeniu kąpieli mata sama się czyści, dezynfekując dysze za pomocą ozonu, co zapewnia higieniczne użytkowanie.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** - system ochrony przed zalaniem i wilgotnością powietrza sprawia, że mata jest bezpieczna nawet w warunkach wysokiej wilgotności.

Dlaczego Wybrać Matę do Masażu AllExclusive?

1. **Indywidualne strefy masażu** - możliwość sterowania masażem w wybranych obszarach (kręgosłup, boczne strefy, cała mata) pozwala na pełne dopasowanie zabiegu do własnych potrzeb.
2. **Doskonały wybór do domu i profesjonalnych gabinetów** - mata ozonowa AllExclusive jest idealna zarówno do użytku domowego, jak i w sanatoriach, gabinetach rehabilitacyjnych czy klubach fitness.
3. **Znana i ceniona na całym świecie** - produkt wyprodukowany w Niemczech, który wyróżnia się wysoką jakością wykonania i licznymi pozytywnymi opiniami użytkowników.

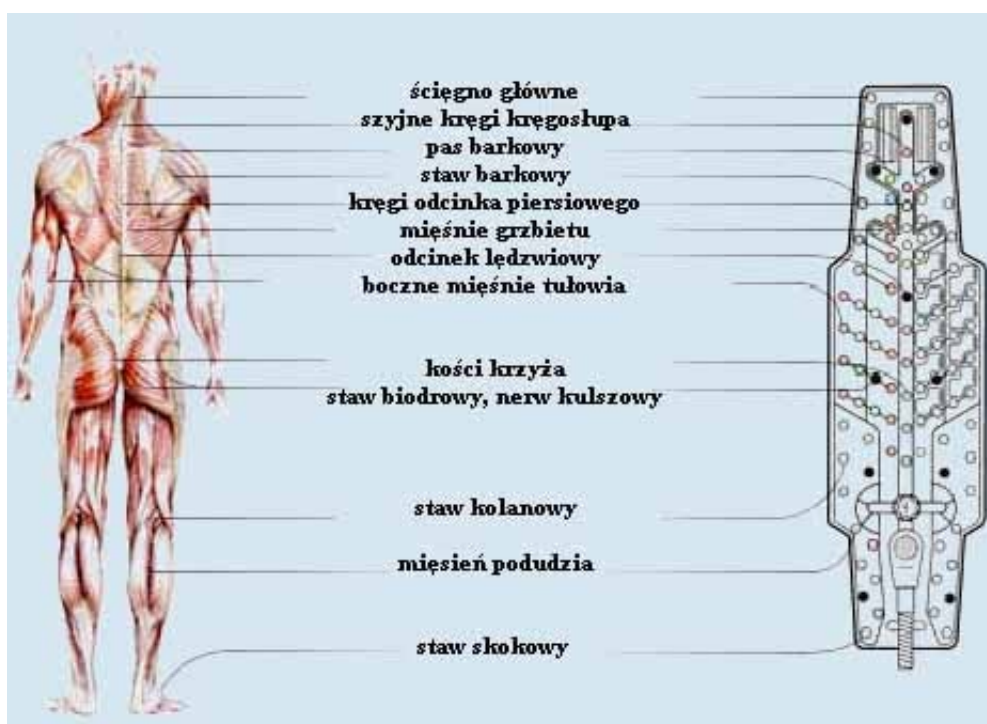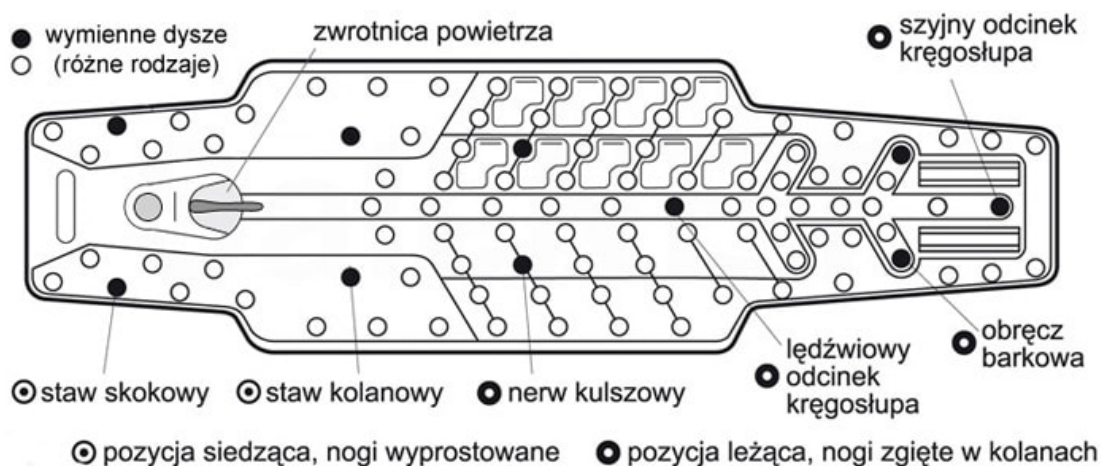

Dysza do biczów wodnych



Dysza do masażu okolic kręgosłupa



Dysza do wytwarzania perełek



Korzyści Zdrowotne i Relaksacyjne

Hydromasaż oferowany przez matę AllExclusive to nie tylko sposób na relaks, ale również efektywne narzędzie wspomagające leczenie różnych dolegliwości, takich jak:

- uporczywe bóle pleców,
- schorzenia aparatu ruchowego,
- problemy z układem krążenia i sercem.

Regularne korzystanie z maty do masażu do wanny wspiera zdrowie fizyczne i psychiczne, rozluźnia mięśnie, poprawia trawienie oraz stymuluje układ krążenia. Dzięki temu, zamiast inwestować w kosztowne zabiegi w gabinetach rehabilitacyjnych, możesz cieszyć się korzyściami kąpieli perełkowej we własnym domu.

Mata Ozonowa z Strefą Kręgosłupa - Intensywny Masaż Dostosowany do Twoich Potrzeb

Mata ozonowa do hydromasażu została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu kompleksowego masażu, szczególnie dla osób szukających intensywnego odprężenia w okolicach kręgosłupa. **Strefa kręgosłupa**, umiejscowiona centralnie na macie, pozwala na precyzyjne ukierunkowanie masażu w takie obszary, jak kręgosłup, ramiona, kark oraz tył głowy. To doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na napięcia mięśniowe w tych partiach ciała.

- **Funkcjonalność i Personalizacja Masażu**

Za pomocą wygodnej w obsłudze **zwrotnicy powietrza**, umiejscowionej przy stopach, możesz łatwo przełączać się między opcją "masażu całego ciała" a "intensywnym masażem kręgosłupa". Zwrotnicę można obsługiwać ręką lub palcami stóp, co sprawia, że regulacja ustawień jest bardzo prosta nawet podczas kąpieli.

Ze względu na intensywną pracę dmuchawy podczas masażu kręgosłupa, producent zaleca zmianę ustawień co 5 minut, aby uniknąć przeciążenia urządzenia.

- **Elastyczne i Przyjazne dla Skóry Materiały**

Mata wykonana jest z **miękkiego i elastycznego tworzywa**, które jest przyjazne dla skóry. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do kształtu wanny, co pozwala skierować strumień powietrza dokładnie w miejsce, które wymaga najwięcej uwagi. Daje to możliwość efektywnego masażu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika.

- **Maksymalna Intensywność Masażu**

Aby uzyskać **najsilniejsze bodźce masażowe**, istnieje możliwość usunięcia dysz z wybranych miejsc na macie. Na przykład, w przypadku odczuwania napięcia w okolicach lędźwi, można zamienić dysze na te o większym przekroju, aby skierować strumień powietrza dokładnie na źródło bólu. To elastyczne rozwiązanie pozwala w pełni dostosować masaż do aktualnych potrzeb ciała.

- **Regulacja Intensywności Masażu**

Jeśli po kilku tygodniach korzystania z kąpieli perletkowej organizm przyzwyczai się do wytwarzanych bodźców, możesz usunąć do 10 dysz, co zwiększy intensywność masażu. W takim przypadku kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 10 minut, a poziom wody powinien być nieco niższy niż podczas standardowej kąpieli, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

- **Ogrzewanie Powietrza - Komfortowa Temperatura**

Dmuchała maty ozonowej wytwarza **strumień ciepłego powietrza**, co zapobiega **obniżeniu temperatury wody** w trakcie kąpieli. Ciepłe powietrze wypływa przez dysze, jednak należy pamiętać, że przy zetknięciu z suchą skórą może być odczuwane jako zbyt gorące, dlatego mata nie powinna być używana "na sucho". W trakcie kąpieli warto zmieniać pozycję, aby masaż oddziaływał równomiernie na całe ciało.

Wybierz Matę Ozonową do Kąpieli AllExclusive

Mata ozonowa AllExclusive to idealne rozwiązanie dla osób, które pragną połączyć relaks z korzyściami zdrowotnymi. Innowacyjne funkcje, takie jak wymienne dysze, program czyszczący czy antybakteryjne tworzywo, gwarantują komfort i bezpieczeństwo użytkowania. **Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją**, a także oferuje pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ciesz się luksusem hydromasażu każdego dnia, dbając o swoje ciało i samopoczucie dzięki macie ozonowej AllExclusive!

PRODUKT POSIADA 2 LATA GWARANCJI!!!

ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Mata do hydromasażu w połączeniu z jednym z dwóch dostępnych generatorów tworzy zestaw;



Generator **Perlamed** (manualny)

NIEDOSTĘPNY!!

(mata+akcesoria+generator)

Funkcje generatora

- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- regulacja intensywności masażu,
- wyłącznik ozonu,
- wyłącznik czasowy,
- lampki kontrolne informujące o stanie urządzenia



Generator **ENERGY II** ze zdalnie sterowanym wodoodpornym pilotem

(mata+akcesoria+generator)

Generator ENERGY II z wodoodpornym, zdalnie sterowanym pilotem (zestaw: mata + akcesoria + generator)

Poznaj nowy wymiar relaksu z **ENERGY II** – innowacyjnym urządzeniem, które zadba o Twoje ciało i umysł, oferując szeroką gamę funkcji:

- **Ozonowanie próżniowe** – skuteczne oczyszczanie powietrza i wody.
- **Podgrzewanie kąpeli** – idealna temperatura dla maksymalnego komfortu.
- **System filtracji powietrza** – zaawansowane filtry zapobiegają powstawaniu kamienia i osadów, dbając o czystość urządzenia.
- **Masaż wibracyjny** – wibracje rozprawdane na matę przez wąż, zapewniają głęboki relaks.
- **Jonizacja powietrza** – twórz korzystny mikroklimat sprzyjający regeneracji.
- **6 zaprogramowanych sesji terapeutycznych** – wybierz gotowy program dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Opcja personalizacji** – stwórz własne programy i dostosuj je do swoich preferencji.

Z **ENERGY II** każda chwila w kąpeli stanie się wyjątkową przyjemnością!



Generator **DREAM** ze świetłoterapią i zdalnie sterowany, wodoodpornym pilotem

(mata+akcesoria+generator)

Funkcje generatora DREAM

Odkryj pełnię relaksu i regeneracji z generatorem DREAM – zaawansowanym urządzeniem łączącym najnowsze technologie, które poprawiają Twoje samopoczucie i wzmocnią zdrowie.

- **Światłoterapia** – stymuluje układ odpornościowy i wspiera metabolizm, korzystnie wpływając na Twoje zdrowie.
- **Ozonowanie próżniowe** – oczyszcza powietrze i wodę, tworząc higieniczne warunki.
- **Podgrzewanie kąpeli** – utrzymuje idealną temperaturę dla komfortu i relaksu.
- **System oczyszczania powietrza** – zaawansowane filtry zapobiegają osadzaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń.
- **Masaż wibracyjny** – wibracje przenoszone na matę przez wąż, zapewniają głęboki relaks i odprężenie mięśni.
- **Funkcja jonizacji** – tworzy zdrowy mikroklimat, sprzyjający regeneracji organizmu.
- **6 zaprogramowanych terapii** – wybierz jeden z gotowych programów terapeutycznych, aby dostosować sesję do swoich potrzeb.
- **Personalizacja programów** – ustaw własne parametry, tworząc idealne warunki do relaksu.

Generator DREAM to Twoje prywatne spa w zaciszu domowym!

Dane techniczne generatora:

- niskosumowowy silnik Siemens,
- antystatyczne tworzywo, klasa V0 i V2,
- zasilanie 230V/50Hz,
- moc turbiny 75W do 900 W, sterowana komputerowo (również pilotem),
- podgrzewanie wody 275 W,
- maksymalna moc 1175 W,
- ozonowanie włączane komputerowo (również pilotem),
- stężenie ozonu 0,03- 0,06 ppm,
- przepływ powietrza od 750 do 9000 l/min sterowany komputerowo (również pilotem),
- czas zabiegu od 5 do 30 min sterowany komputerowo (również pilotem),
- ciśnienie wyjściowe 120 – 220 mb,
- nie wymaga uziemienia,
- podwójna ochrona izolacyjna,
- stopień zabezpieczenia przed wilgocią: wodoszczelny,
- waga urządzenia: 3,2 kg,
- zasięg pilota (wodoszczelny) 5 m,
- długość węża łączącego 3 m.

Funkcje terapeutyczne maty;

- stopy - staw skokowy, masaż receptorów (akupresura);
- łydki - mięśnie podudzia, ścięgno Achillesa;
- stawy kolanowe - więzadła podkolanowe;

- stawy biodrowe - nerw kulszowy;
- kości krzyża - napięcia mięśniowe (długotrwała pozycja siedząca);
- gorset mięśniowy grzbietu - lędźwi, boczne mięśnie tułowia;
- kręgosłup - więzadła międzykręgowe (zwyrodnienia), mięśnie przykręgosłupowe (odpowiedzialne za prawidłową anatomiczną pozycję);
- obręcz barkowa - napięcia międzyłopatkowe (zastrzały);
- szyja - odcinek ścięgna głównego (ból głowy);
- aparat ruchu - osteoporoza, reumatyzm, artretyzm, bóle stawów.

Zestaw zawiera;

- Matę do hydromasażu o wymiarach 140 x 38 cm z ozonem do wanny,
- Wybrany generator,
- Wodoodporny, zdalnie sterowany pilot,
- Kociołka Kneippa z małą matą (z przyssawkami) umożliwiający przeprowadzenie masażu wirowego kończyn górnych i dolnych,
- Zestaw montażowy do generatora i pilota,
- Zestawu akcesorii: wymienne dysze, wąż do podłączenia generatora z matą, przejściówka do podłączenia węża z matą, poduszczonek pod głowę (z przyssawkami), przystawka do inhalacji, masażu punktowego piersi i stawów, przystawka ze szczotką do miejscowego masażu pobudzającego, dysza do biczów wodnych, termometr, książeczka opisująca działanie kąpiei perełkowych, instrukcja obsługi, dowód zakupu; paragon lub fakturę.

Dodatkowo do każdej maty można zakupić olejek do kąpiei (500ml):

- **Kasztanowiec:** wzmacnia żyły, zmniejsza opuchliznę i obrzęki, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie.
- **Sosna górska:** poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie.
- **Kwiaty polne:** działa rozluźniająco na mięśnie, przeciw-reumatycznie, poprawia ukrwienie.
- **Melisa:** działa rozkurczowo i przeciwskurczowo, relaksuje, uspokaja, odpręża, wzmacnia krążenie.
- **Lawenda:** relaksuje, uspokaja, odpręża, poprawia ukrwienie, działa rozluźniająco na mięśnie.
- **Rozmaryn:** działa rozluźniająco i pobudzająco, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, działa rozluźniająco na mięśnie i przeciwreumatycznie.
- **Algi morskie:** ujędrnia skórę i redukuje cellulitis, poprawia ukrwienie, relaksuje, uspokaja, odpręża.
- **Eukaliptus:** ułatwia oddychanie i odkrztuszanie, wzmacnia krążenie, poprawia ukrwienie.
- **101 ziół;** zapewnia nową vitalność po wysiłku fizycznym i psychicznym.
- **Jałowiec;** ze względu na działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze wspomaga leczenie stanów zapalnych skóry i dróg oddechowych.



Cena za olejki: 278zł/1L (*kształt butelek może ulec zmianie)

Ozonoterapia - Skuteczna i Bezpieczna Metoda Leczenia

Ozonoterapia to coraz popularniejsza metoda leczenia, wykorzystywana zarówno w medycynie, jak i domowych zabiegach relaksacyjnych. Bazuje na działaniu aktywnego tlenu (ozonu), który wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu, poprawia krążenie oraz oczyszcza skórę. Mimo obaw związanych z chemicznymi właściwościami ozonu, warto zaznaczyć, że w kontrolowanych warunkach, takich jak maty do hydromasażu z ozonoterapią, jest on bezpieczny i przynosi szereg korzyści zdrowotnych.

Czym jest ozon i dlaczego warto go stosować?

Ozon (O₃) to forma tlenu składająca się z trzech atomów, która posiada silne właściwości oczyszczające i dezynfekujące.

Znajduje zastosowanie w oczyszczaniu powietrza, wody i skóry.

Urządzenia, takie jak **Generator Dream** oraz **Generator ENERGY II**, wytwarzają ozon w ściśle kontrolowanych i bezpiecznych ilościach, co sprawia, że jego obecność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. W hydromasażowych matach ozon jest wprowadzany do wody, gdzie korzystnie działa na skórę, jednocześnie nie oddziałując na układ oddechowy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa terapii.

Korzyści zdrowotne ozonoterapii

Detoksykacja i oczyszczanie skóry – Ozon wykazuje silne właściwości antybakteryjne i antywirusowe, dzięki czemu skutecznie oczyszcza skórę i wspomaga walkę z różnymi problemami dermatologicznymi, takimi jak trądzik czy infekcje skórne.

Poprawa krążenia – Ozon stymuluje krążenie krwi, co poprawia dotlenienie tkanek i wspomaga regenerację komórek. Terapia ozonem przyspiesza gojenie ran i regenerację mięśni.

Wzmocnienie odporności – Ozonoterapia wzmacnia układ odpornościowy, pomagając organizmowi w walce z infekcjami i stanami zapalnymi.

Redukcja zmęczenia i poprawa samopoczucia – Regularne stosowanie ozonoterapii poprawia nastrój, redukuje stres oraz zmniejsza uczucie zmęczenia, dzięki lepszemu dotlenieniu organizmu.

Bezpieczeństwo ozonoterapii

W urządzeniach do domowej ozonoterapii, takich jak Generator Dream i Generator ENERGY II, ozon jest podawany w bezpiecznym stężeniu 0,03-0,06 ppm, zgodnym z normami bezpieczeństwa. Ozon natychmiast reaguje z wodą, rozkładając się na tlen cząsteczkowy (O₂), co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, jednocześnie wzbogacając kąpiel w aktywny tlen.

Światłoterapia – Klucz do lepszego samopoczucia z Generatora Dream

Światłoterapia to innowacyjna metoda, która zyskuje na popularności w medycynie i urządzeniach domowych. W Generatorze Dream połączenie hydromasażu, ozonoterapii i światłoterapii maksymalizuje korzyści zdrowotne, wpływając pozytywnie na samopoczucie i zdrowie.

Jak działa światłoterapia?

Światłoterapia opiera się na działaniu światła o określonym spektrum, które wspiera procesy biochemiczne w organizmie. Generator Dream wykorzystuje światło terapeutyczne, które równoważy naturalne rytmy biologiczne, poprawia nastrój i wspiera układ odpornościowy.

Kluczowe korzyści światłoterapii

- **Wzmocnienie odporności** – Światło stymuluje produkcję witaminy D, co wzmacnia układ odpornościowy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
- **Redukcja stresu i poprawa nastroju** – Światłoterapia skutecznie poprawia nastrój, pomagając w walce z sezonową depresją (SAD) oraz redukując poziom stresu.
- **Wsparcie metabolizmu i poprawa krążenia** – Światło wspomaga dotlenienie tkanek i regenerację mięśni, co jest korzystne dla osób aktywnych fizycznie.
- **Regulacja rytmu dobowego i poprawa snu** – Światłoterapia pomaga w regulacji cyklu snu, co przekłada się na lepszą jakość odpoczynku nocnego.

Połączenie terapii dla maksymalnych efektów


Generator Dream umożliwia jednocześnie korzystanie z hydromasażu, ozonoterapii i światłoterapii, co zapewnia kompleksową terapię dla ciała i umysłu. To idealny wybór dla osób szukających relaksu i regeneracji w domowym zaciszu.

Dlaczego warto wybrać Generator Dream?

- Generator Dream oferuje bezpieczne i skuteczne połączenie nowoczesnych terapii w jednym urządzeniu. Światłoterapia, ozonoterapia i hydromasaż tworzą idealną kombinację do codziennej regeneracji organizmu. Dzięki regularnemu stosowaniu możesz cieszyć się lepszym zdrowiem, samopoczuciem i kondycją skóry w domowych warunkach.



Generator DREAM ze światłoterapią i jego programy;

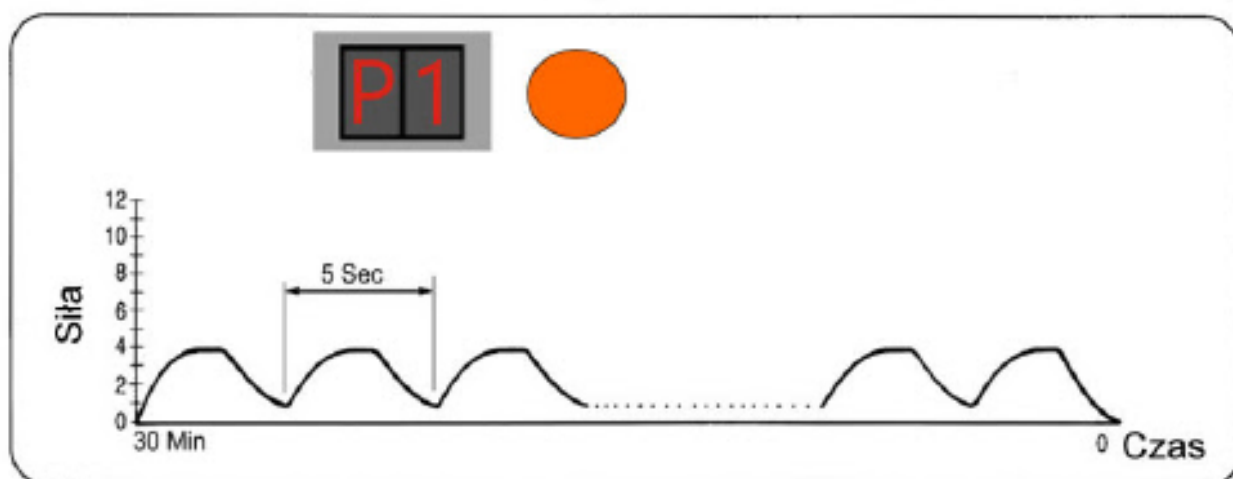

Program 1 - Delikatne Bodźce Relaksacyjne


Program 1 to doskonały wybór na wieczorne sesje relaksacyjne przed snem. Charakteryzuje się łagodnymi, niskointensywnymi i krótkotrwałymi bodźcami, które pomagają wyciszyć organizm i przygotować go do odpoczynku. Dzięki temu program działa uspokajająco, nie wywołując nadmiernej stymulacji.

Zalecenia:

- **Temperatura wody:** 36°C – komfortowa i relaksująca, idealna do wieczornego wyciszenia.
- **Ozon:** wyłączony – brak dodatkowej stymulacji skóry, co sprzyja spokojnemu zakończeniu dnia.

- **Interwał:** włączony – regularne, rytmiczne zmiany w intensywności bodźców wspierają odprężenie i ułatwiają zasypianie.

Ten program idealnie wpasuje się w codzienne rytuały relaksacyjne, zwłaszcza po intensywnym dniu.

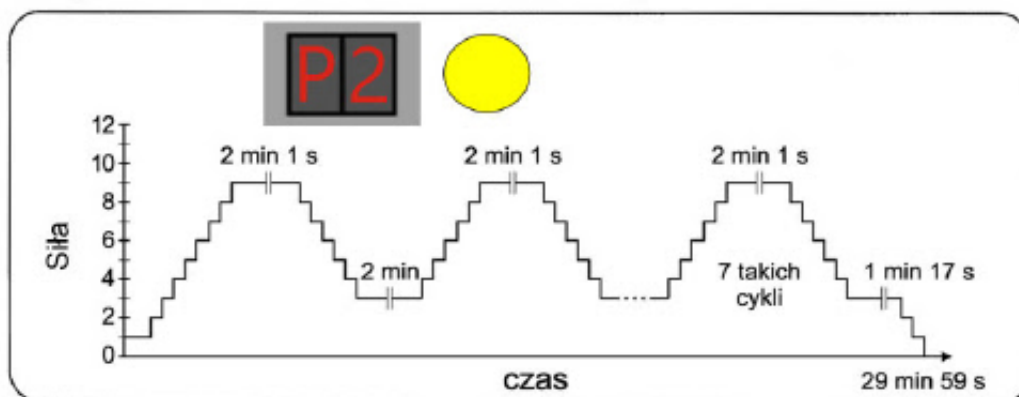


Program 2 - "Odprężający"

Program 2, nazwany "Odprężający", został zaprojektowany z myślą o osobach pragnących osiągnąć głębokie odprężenie. Idealny dla tych, którzy szukają sposobów na relaks, ten program charakteryzuje się powolnym napływem bodźców, których intensywność jest naprzemiennie zwiększana i zmniejszana. Fazy o obniżonej intensywności sprzyjają pełnemu wyciszeniu, co wspomaga regenerację ciała oraz umysłu.

Zalecenia dla Programu "Odprężający":

- **Temperatura wody:** 36°C – to optymalna temperatura, która zapewnia maksymalny komfort i relaks.
- **Ozon:** wyłączony – brak dodatkowych stymulacji sprzyja głębokiemu odprężeniu oraz relaksowi.
- **Interwał:** wyłączony – stabilny przepływ bodźców pozwala na spokojną i harmonijną kąpiel.

Program "Odprężający" to znakomity wybór na relaksację po długim, stresującym dniu. Dzięki niemu poczujesz ulgę, a Twoje ciało i umysł zyskają ukojenie, co przyczyni się do lepszego samopoczucia.

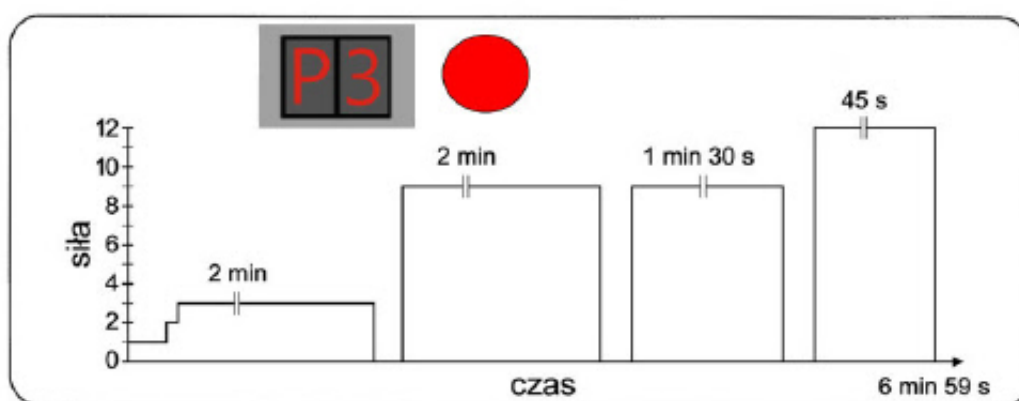


Program 3 - "Orzeźwiający"

Program 3, znany jako "Orzeźwiający", to doskonały wybór na poranne pobudzenie i energetyczny zastrzyk na cały dzień. Dzięki rytmicznie narastającym bodźcom, które stopniowo zwiększają swoją intensywność, program skutecznie orzeźwia zarówno ciało, jak i umysł. To idealne rozwiązanie dla osób, które pragną rozpocząć dzień z nową energią i świeżością. Zalecenia dla programu "Orzeźwiającego"

- **Temperatura wody: 30°C:** Chłodniejsza woda orzeźwia, pobudza krążenie i przyspiesza procesy regeneracyjne. Taka temperatura jest idealna na początek dnia, aby dodać sobie energii oraz zrelaksować ciało.
- **Ozon:** włączony. Włączenie ozonu dodatkowo dotlenia skórę, wspomagając jej regenerację i poprawiając kondycję. Ozon ma właściwości antybakteryjne, co korzystnie wpływa na zdrowie skóry.
- **Interwał:** wyłączony. Brak interwałów pozwala na płynne, narastające bodźce bez przerw. Taki ciągły program pomaga w pełnym rozbudzeniu, co sprawia, że jesteśmy gotowi na wyzwania dnia.

Dlaczego warto wybrać program "Orzeźwiający"?

Program "Orzeźwiający" to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce dodać sobie energii na początek dnia. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pobudzenia przed pracą, czy chcesz po prostu poczuć się lepiej, ten program z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Wybierz "Orzeźwiający" i ciesz się pełnią energii przez cały dzień!

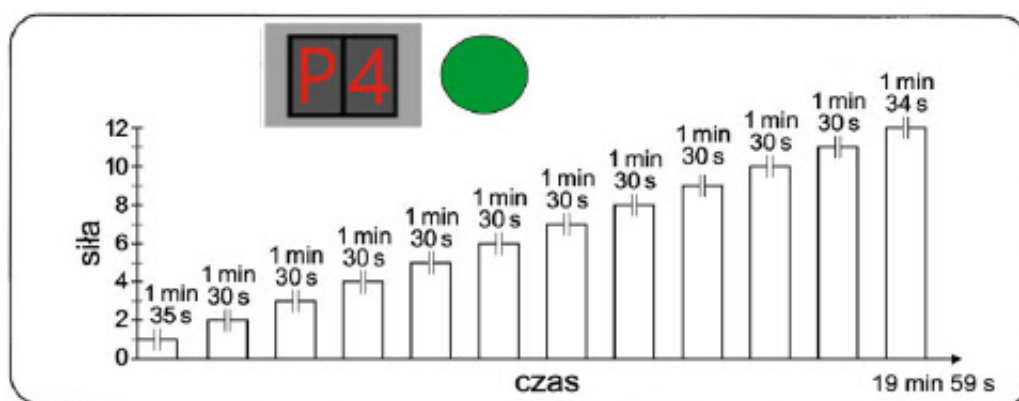

Program 4 - "Trening układu krążenia"


Program 4, zatytułowany "Trening układu krążenia", to intensywny program zaprojektowany w celu stymulacji układu krążenia. Dzięki krótkim, dynamicznym bodźcom, wzmacnianym przez aktywny ozon, ten program skutecznie pobudza cały organizm, zwłaszcza wspomaga pracę naczyń krwionośnych. Regularne korzystanie z tego programu poprawia krążenie, dotlenia tkanki oraz wspomaga regenerację mięśni, co przekłada się na lepszą kondycję fizyczną.

Zalecenia dla programu "Trening układu krążenia"

- **Temperatura wody: 37°C.** Temperatura 37°C jest optymalna do zwiększenia przepływu krwi, co przyczynia się do poprawy krążenia. Ciepła woda relaksuje i przygotowuje organizm do intensywnego treningu.
- **Ozon:** włączony. Włączenie ozonu wspomaga dotlenienie komórek oraz regenerację tkanek, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia układu krążenia. Ozon ma także działanie antybakteryjne, co pozytywnie wpływa na ogólną kondycję organizmu.
- **Interwał:** wyłączony. Brak interwałów pozwala na stały przepływ intensywnych bodźców, co zapewnia skuteczną stymulację układu krążenia bez przerw. Dzięki temu organizm ma możliwość ciągłej pracy i adaptacji do rosnących wyznań.

Dlaczego warto wybrać program "Trening układu krążenia"?

Program "Trening układu krążenia" to doskonały sposób na poprawę wydolności organizmu oraz wsparcie zdrowia układu krwionośnego. Idealny dla osób aktywnych, które pragną zwiększyć swoją kondycję oraz poprawić ogólny stan zdrowia. Wybierz program "Trening układu krążenia" i ciesz się lepszym samopoczuciem oraz zwiększoną energią na co dzień!

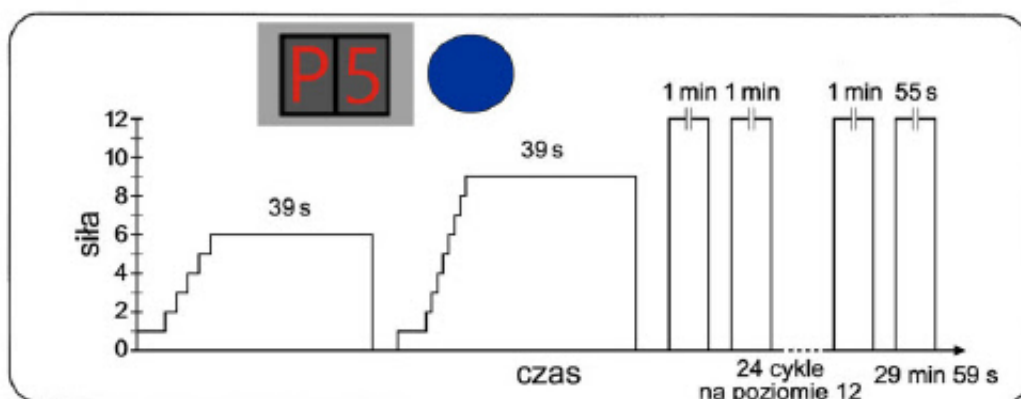

Program 5 - "Masaż sportowy"

Program 5, znany jako **"Masaż sportowy"**, to intensywny masaż stworzony z myślą o osobach aktywnych fizycznie. Idealnie nadaje się zarówno przed treningiem, aby przygotować mięśnie do wysiłku, jak i po, aby wspomóc ich regenerację. Dzięki stopniowo narastającym bodźcom, które osiągają maksymalną intensywność w regularnych odstępach, program skutecznie pobudza krążenie oraz zmniejsza napięcie mięśniowe.

Zalecenia dla programu "Masaż sportowy"

Temperatura wody: 32°C

Chłodniejsza woda o temperaturze 32°C wspomaga regenerację mięśni, redukuje zmęczenie oraz przyspiesza odnowę powysiłkową. To idealny wybór dla sportowców, którzy chcą szybko zregenerować siły.

Ozon: włączony

Ozon w programie dodatkowo dotlenia tkanki, co przyspiesza regenerację i pomaga w usuwaniu produktów przemiany materii, takich jak kwas mlekowy. Dzięki temu mięśnie szybciej odzyskują sprawność.

Interwał: wyłączony

Program działa w sposób ciągły, bez przerw, dostarczając stabilnych, intensywnych bodźców, które maksymalnie stymulują mięśnie oraz wspierają prawidłowe krążenie.

Dlaczego warto wybrać program "Masaż sportowy"?

Program **"Masaż sportowy"** to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoje wyniki sportowe oraz przyspieszyć regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Regularne korzystanie z tego programu nie tylko zwiększa wydolność mięśni, ale także minimalizuje ryzyko kontuzji. Wybierz **"Masaż sportowy"**, aby osiągnąć lepszą formę i efektywnie wspomóc regenerację po treningu!

Mata Ozonowa AllExclusive oferuje pełne dostosowanie kąpieli do indywidualnych potrzeb, umożliwiając ustawienie czasu i intensywności masażu za pomocą wodoszczelnego pilota. Funkcja interwału wprowadza cykliczne przerwy, co zwiększa efektywność masażu – 30 sekund pracy i 10 sekund przerwy. Wbudowana funkcja ozonowania eliminuje bakterie i nieprzyjemne zapachy, zapewniając higieniczną kąpiel i intensyfikując odczucia masażu. Światłoterapia Dream, dostępna w sześciu kolorach, działa na ciało i umysł: czerwony pobudza, żółty poprawia nastrój, niebieski uspokaja, a zielony relaksuje, oferując kompleksową terapię w domowym zaciszu.

Mata ozonowa jest innowacyjnym urządzeniem wykorzystywanym **w rehabilitacji**, które szczególnie zyskuje na popularności w terapii dzieci z **mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)**. Jej działanie opiera się na dostarczaniu ozonu do organizmu poprzez skórę, co ma za zadanie poprawić krążenie krwi, dotlenienie tkanek oraz przyspieszyć procesy regeneracyjne.

W kontekście rehabilitacji dzieci z MPD, mata ozonowa może wspomagać terapię poprzez:

- **Poprawę krążenia** – Dzieci z MPD często mają zaburzenia krążeniowe, zwłaszcza w kończynach. Terapia ozonowa stymuluje przepływ krwi, co może wpływać na lepsze ukrwienie mięśni, ich odżywienie i dotlenienie, co wspomaga pracę nad funkcją motoryczną.
- **Redukcję stanów zapalnych** – Ozon ma właściwości przeciwzapalne, co może być pomocne w łagodzeniu napięć mięśniowych i stanów zapalnych, które często towarzyszą MPD.

-
- **Przyspieszenie regeneracji tkanek** – Ozon wspiera procesy naprawcze organizmu, co może być istotne w kontekście rehabilitacji dzieci wymagających poprawy sprawności fizycznej po długotrwałych usztywnieniach mięśni czy zabiegach ortopedycznych.
 - **Zwiększenie elastyczności mięśni** – Regularne korzystanie z maty ozonowej może pomóc w rozluźnianiu napiętych mięśni, co jest częstym problemem u dzieci z MPD z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego (spastyczności). To może ułatwić dalsze zabiegi rehabilitacyjne, takie jak ćwiczenia czy terapia manualna.
 - **Poprawa komfortu i jakości snu** – U dzieci z MPD często obserwuje się problemy ze snem, wynikające z bólu, dyskomfortu lub napięcia mięśniowego. Terapia ozonowa może pomóc w ich złagodzeniu, co przekłada się na lepszy sen i ogólne samopoczucie dziecka.

Choć mata ozonowa nie zastępuje tradycyjnych metod rehabilitacji, może stanowić wartościowe uzupełnienie terapii fizjoterapeutycznych, wspierając procesy regeneracyjne i poprawiając komfort życia dziecka z MPD. Ważne jest jednak, aby jej stosowanie było skonsultowane z lekarzem lub fizjoterapeutą, który dobierze odpowiedni program terapii.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Czytaj więcej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model maty ozonowej: Mata do hydromasażu AllExclusive Generator ENERGY II , Mata do hydromasażu AllExclusive Generator DREAM (+ 300,00 zł)

Olejki roślinne do kąpieli: brak , Lawenda 500ml (+ 139,00 zł) , Eukaliptus 500ml (+ 139,00 zł) , Melisa 500ml (+ 139,00 zł) , 47 ziół 500ml (+ 139,00 zł) , Jałowiec 500ml (+ 139,00 zł) , Rozmaryn 500ml (+ 139,00 zł) , Sosna górska 500ml (+ 139,00 zł) , Kasztanowiec 500ml (+ 139,00 zł) , Kwiaty polne 500ml (+ 139,00 zł) , 101 ziół 500ml (+ 139,00 zł) , Algi morskie 500ml (+ 139,00 zł)