


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-z-analizatorem-masy-ciala-p-2291.html>



Waga łazienkowa Salter 9112 BK3R z pomiarem tłuszczu i wody – 180 kg

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Cena poprzednia	119,00 zł
Dostępność	

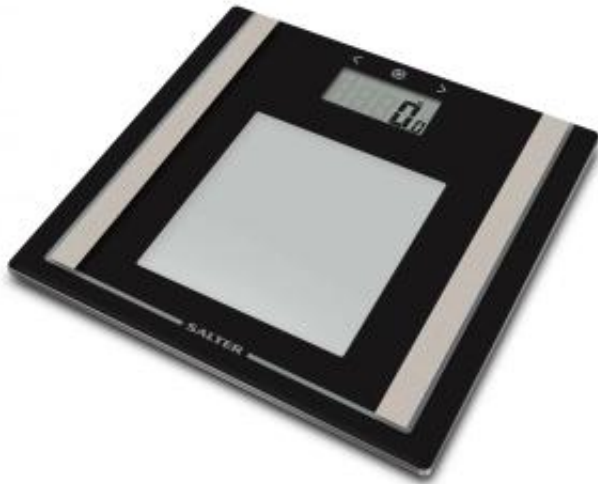

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9112 BK3R

Opis produktu

Salter 9112 BK3R – elektroniczna waga z analizą składu ciała

Waga łazienkowa Salter 9112 BK3R umożliwia sprawdzanie masy ciała oraz wybranych parametrów jego składu. W jednym urządzeniu połączono zwykłą wagę osobową z analizatorem BIA, który szacuje zawartość tkanki tłuszczowej, wody, masę mięśniową i kostną oraz oblicza wskaźniki BMI i BMR.

Model oferuje maksymalne obciążenie **180 kg** i podziałkę pomiaru masy 100 g. Duży wyświetlacz LCD ułatwia odczytywanie wyników, a pamięć danych 10 użytkowników pozwala przygotować indywidualne ustawienia dla kilku domowników.

Co można sprawdzić za pomocą wagi?

Salter 9112 BK3R wykorzystuje analizę impedancji bioelektrycznej (BIA). Podczas pomiaru przez ciało przepływa niewyczuwalny impuls elektryczny. Na podstawie uzyskanych danych oraz ustawień profilu użytkownika urządzenie szacuje wybrane parametry składu organizmu.

- **Masa ciała** – ważenie do 180 kg z podziałką 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowy procentowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjna zawartość wody wyrażona procentowo.
- **Masa mięśniowa** – szacunkowy parametr pomocny w obserwowaniu zmian sylwetki.
- **Masa kostna** – orientacyjna wartość obliczana przez analizator.
- **BMI** – wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie masy i wzrostu.
- **BMR** – oszacowanie podstawowej przemiany materii, czyli energii zużywanej przez organizm w spoczynku.

Ważne: wyniki analizy składu ciała mają charakter szacunkowy. Nie są pomiarami diagnostycznymi i nie zastępują badań medycznych.

10 profili użytkowników – jedna waga dla domowników

W pamięci wagi można zapisać dane maksymalnie **10 osób**. Każdy użytkownik ma własny profil uwzględniający informacje wymagane do obliczania parametrów składu ciała.

Urządzenie posiada również tryb dziecięcy oraz tryb sportowca. Tryb sportowy przeznaczony jest dla osób spełniających kryteria aktywności określone w instrukcji producenta.

Pamięć 10 użytkowników dotyczy danych profili, a nie przechowywania historii kolejnych wyników ważenia.

Jak prawidłowo korzystać z analizatora BIA?

Do podstawowego pomiaru masy ciała wystarczy stanąć na wadze po jej wcześniejszej inicjalizacji. W celu przeprowadzenia analizy składu ciała należy wybrać zapisany profil, poczekać na wskazanie zera i wejść na platformę bosymi stopami, zapewniając kontakt z metalowymi elektrodami.

Wagę należy ustawić na stabilnym, równym podłożu. W przypadku korzystania z dywanu producent przewidział specjalne stopki dołączone do zestawu. Po przestawieniu urządzenia należy ponownie je zainicjalizować.

Dla łatwiejszego porównywania wyników zaleca się wykonywanie pomiarów o podobnej porze i w zbliżonych warunkach. Zmiany nawodnienia organizmu mogą wpływać na wskazania analizatora.

Specyfikacja techniczna Salter 9112 BK3R

Marka	Salter
Model	9112 BK3R
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Technologia analizy	BIA - analiza impedancji bioelektrycznej
Maksymalne obciążenie	180 kg
Podziałka pomiaru masy	100 g
Jednostki ważenia	kg, st, lb
Analiza składu ciała	Tkanka tłuszczowa, woda, masa mięśniowa, masa kostna
Dodatkowe wskaźniki	BMI, BMR
Pamięć użytkowników	10 profili
Tryby specjalne	Dziecięcy i sportowy
Wyświetlacz	LCD, 80x39 mm
Platforma	Szkoło hartowane z metalowymi elektrodami
Wymiary urządzenia	30x30x2 cm (wysokość ok.)
Kolor	Czarno-srebrny
Uruchamianie ważenia	Step-on po inicjalizacji
Automatyczne wyłączanie	Tak
Zasilanie	2 baterie AAA - w zestawie
Dodatkowe wyposażenie	Stopki do stosowania na dywanach
Stan produktu	Nowy
Gwarancja	24 miesiące

Bezpieczeństwo i pielęgnacja wagi

W przypadku ciąży producent zaleca korzystanie wyłącznie z podstawowej funkcji ważenia. Osoby z rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym elektronicznym urządzeniem medycznym nie powinny korzystać z analizatora.

Platformę należy czyścić lekko wilgotną ściereczką. Nie należy dopuszczać do zalania elektroniki ani stosować agresywnych środków czyszczących.

Salter 9112 BK3R - wyposażenie i gwarancja

W zestawie znajdują się baterie AAA oraz stopki do stosowania urządzenia na dywanach. Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** zgodnie z warunkami obowiązującymi w ofercie SaleMED.

Jeżeli poszukujesz innych modeli do codziennego ważenia, sprawdź również [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED](#).