

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-drewniana-gaia-do-gabinetow-odnowy-p-184.html>

Kozetka drewniana Gaia do gabinetów odnowy



Cena brutto	2 136,00 zł
Cena netto	1 977,78 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Czas wysyłki	do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-K-LG1
Kod producenta	GAIA I

Opis produktu

Kozetka drewniana Gaia 190×70 cm

- Przeznaczenie: gabinety fizjoterapii, masażu i odnowy; sprawdzi się także jako stół do badania / stół zabiegowy oraz leżanka kosmetyczna.
- Wymiary blatu: 190 × 70 cm.
- Regulacja wysokości: skokowa 55-83 cm (wygodne gałki).
- Nośność: 200 kg – stabilna konstrukcja drewniana.
- Wyposażenie: półka pod leżyskiem; opcjonalnie podgłówek i wieszak na papier.
- Tapicerka: skóropodobna / winyl medyczny – odporna, łatwa dezynfekcja, szeroka paleta kolorów.
- Produkcja w Polsce
- VAT 8%.
- Waga: 32 kg.

Kozetka drewniana Gaia to wysokiej jakości kozetka lekarska dla profesjonalistów pracujących w masażu, fizjoterapii i odnowie biologicznej. Stabilna rama z drewna oraz regulacja wysokości w przedziale 55-83 cm pozwalają ergonomicznie ustawić pozycję pracy i zapewniają pacjentowi bezpieczne, wygodne podparcie. Obsługa gałkami jest szybka i intuicyjna, dzięki czemu łatwo dopasujesz leżankę do wzrostu terapeuty i rodzaju zabiegu.

Pod blatem znajduje się praktyczna półka, która mieści ręczniki, środki dezynfekujące i akcesoria terapeutyczne – masz wszystko pod ręką, a stanowisko pracy pozostaje uporządkowane. Tapicerka ze skóropodobnego materiału lub winylu medycznego jest trwała, odporna na codzienne użytkowanie i zgodna z typowymi środkami do czyszczenia w placówkach medycznych.

Dostępny podgłówek (prosty lub regulowany) zwiększa komfort ułożenia głowy i szyi podczas dłuższych sesji, a wieszak na papier ułatwia higieniczne przygotowanie leżanki do kolejnego zabiegu. Gaia jest produkowana w Polsce i wpisana do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jakość wykonania i zgodność z wymogami branży. To niezawodna leżanka medyczna do codziennej pracy, chętnie wybierana również jako leżanka kosmetyczna.

Zastosowanie:

Fizjoterapia, terapia manualna, masaż klasyczny i sportowy, zabiegi odnowy.
Badania lekarskie i drobne zabiegi ambulatoryjne (stół do badania / stół zabiegowy).
Pielęgnacja i zabiegi w salonach beauty (leżanka kosmetyczna).


Warianty i akcesoria:

Podgłówek: prosty lub regulowany.

Wycięcie na twarz z zatyczką
Wieszak na papier: do rolek ochronnych.
Kolorystyka tapicerki: szeroka paleta (skóropodobna / winyl medyczny).

Dane techniczne:

- Długość: 190 cm.
- Szerokość: 70 cm.
- Wysokość (regulacja skokowa): 55-83 cm.
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg.
- Waga: 32 kg.
- Konstrukcja: drewno (stabilna rama) + półka pod leżyskiem.
- Tapicerka: skóropodobna / winyl medyczny, łatwa w dezynfekcji.
- Produkcja: Polska.
- Podatek VAT: 8%.

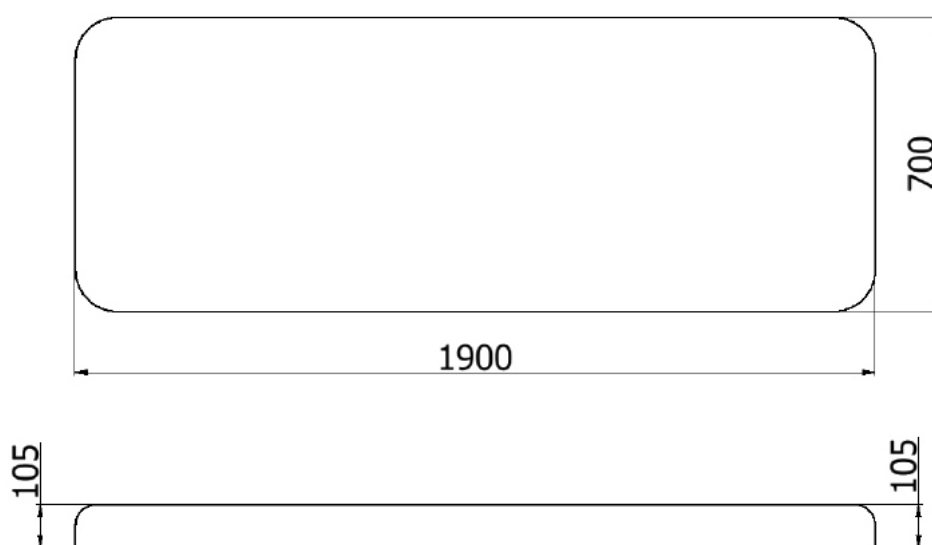

Kozetka

drewniana Gaia – kluczowe dane techniczne: blat 190×70 cm, regulacja 55-83 cm (skokowa), nośność 200 kg, waga 32 kg.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Po każdym zabiegu przetrzyj tapicerkę miękką ściereczką i środkiem do dezynfekcji kompatybilnym z winylem medycznym. Unikaj preparatów na bazie chloru oraz agresywnych rozpuszczalników. Po czyszczeniu osusz powierzchnię.

Najczęstsze pytania (FAQ):

Do jakich zastosowań najlepiej sprawdzi się kozetka Gaia?

To uniwersalna leżanka medyczna do fizjoterapii, masażu, badań i drobnych zabiegów ambulatoryjnych; regulacja wysokości ułatwia ergonomiczne ustawienie.

Czy wysokość jest regulowana płynnie?

Wysokość regulowana jest skokowo w zakresie 55-83 cm, za pomocą wygodnych gałek.

Jaka jest nośność kozetki?

Dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg.

Jak dbać o tapicerkę?

Używaj środków do dezynfekcji zgodnych z winylem medycznym; unikaj chloru i rozpuszczalników. Po czyszczeniu wytrzyj do sucha.

Czy dostępne są akcesoria?

Tak — podgłówek (prosty lub regulowany), wieszak na papier lub wycięcie na twarz. Półka pod leżyskiem jest w standardzie.

Jaki jest podatek VAT?

Na ten wyrób medyczny obowiązuje stawka VAT 8%.

Tapicerka - kolory, właściwości i pielęgnacja.

Tapicerka medyczna – materiał PCW o podwyższonej odporności

Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW, odporny na płyny ustrojowe, oleje, alkohol oraz środki dezynfekcyjne, w tym z aktywnym chlorem. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Najważniejsze cechy:

- Trudnopalność: materiał odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 – test papierosa).
- Odporność mechaniczna: wysoka odporność na rozdarcia (PN-EN ISO 4674-1).
- Odporność na ścieranie: potwierdzona badaniami (PN-EN ISO 5470-2 oraz PN-EN 12947-4).
- Bezpieczeństwo chemiczne: materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych – certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100.

Nie zawiera:

- ftalanów: DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP,
- związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs,
- pierwiastków szkodliwych – zgodnie z EN-71-3,
- lateksu.

Pielęgnacja:

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem dopuszczonym do dezynfekcji materiałów PCW (również z aktywnym chlorem). Unikaj acetonu i silnych rozpuszczalników. Po czyszczeniu osusz do sucha.

Tapicerka Standard Line



Kolorystyka może odbiegać od rzeczywistych kolorów.



Kolory tapicerki

kozetki Gaia – próbnik dostępnych wykończeń.

Tapicerka medyczna – winyl o podwyższonej odporności (z PERMABLOK3®, Hi-Loft²™ i SILVERGUARD®)
Materiał winylowy o zastosowaniu medycznym, o zwiększonej odporności na płyny ustrojowe. Posiada antystatyczne wykończenie, odporny na pleśń podkład oraz wzmocnioną warstwę wierzchnią. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Kluczowe technologie i warstwy

- PERMABLOK3® – ochronna warstwa wierzchnia tworząca skuteczną barierę przeciw bakteriom, ścieraniu i plamom; zapewnia wyjątkową ochronę przed rozwojem grzybów (bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby nitkowate, drożdże).
- Hi-Loft²™ – specjalny, pleciony podkład z włókien 100% poliestrowych; gruby, mocny, nadaje tapicerce charakterystyczną miękkość i trwałość.
- SILVERGUARD® – przyjazna dla środowiska, oparta na jonach srebra ochrona antybakteryjna; ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów i plam, wspiera świeżość i wydłuża cykl życia produktu.

Odporności i normy

- Trudnopalność: PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosa, test zapałki).
- Rozdzarcia: EN ISO 4674-1.
- Ścieranie: EN ISO 12947-2.
- Promieniowanie UV: XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479.
- Plamy siarczkowe: podwyższona odporność.
- Niska temperatura: do -23°C.
- Antystatyczne wykończenie; podkład odporny na pleśń.

Bezpieczeństwo

- Materiał nie zawiera ftalanów.
- Zgodny z EN-71-3 (brak pierwiastków szkodliwych).
- Przeznaczony również do zastosowań dla dzieci.

Pielęgnacja

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem do dezynfekcji dopuszczonym dla tapicerek winylowych (zgodnych z warstwą ochronną). Unikaj agresywnych rozpuszczalników; po czyszczeniu osusz powierzchnię.



Winył medyczny: PERMABLOK3® (bariera przeciw bakteriom, plamom i ścieraniu), podkład Hi-Loft²™, ochrona SILVERGUARD®; bez ftalanów, zgodny z EN-71-3.

Pobierz instrukcję pielęgnacji (PDF) – [skaj](#) (PCV) i [winył](#)

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł) , wenge (+ 80,00 zł)

Podglówek prosty J: nie , tak (+ 55,00 zł)

Podglówek regulowany J: nie , tak (+ 89,00 zł)

Wycięcie na twarz J: nie , tak (+ 69,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)