

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-drewniana-do-salonu-kosmetycznego-hera-p-181.html>



Leżanka drewniana do salonu kosmetycznego - Hera

Cena brutto	1 837,00 zł
Cena netto	1 700,93 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Czas wysyłki	do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-L-LG10

Opis produktu

Leżanka drewniana „Hera” do gabinetu i salonu kosmetycznego

Leżanka Hera to solidne, estetyczne i funkcjonalne wyposażenie do gabinetów kosmetycznych, fizjoterapeutycznych oraz placówek medycznych. Stabilna konstrukcja z drewna ociepla wnętrze i podkreśla profesjonalny charakter przestrzeni, a regulowany zagłówek (0-45°) pozwala wygodnie ułożyć pacjenta w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej.

Najważniejsze korzyści

- Stabilność i bezpieczeństwo – dopuszczalne obciążenie do 200 kg; pewne podparcie podczas zabiegów i masażu.
- Ergonomia pracy – trzy wysokości do wyboru (55, 65 lub 75 cm) ułatwiają dopasowanie do wzrostu personelu i rodzaju zabiegów.
- Wygodna organizacja – pojemna półka podbłatowa na ręczniki, akcesoria i preparaty, zawsze „pod ręką” (opcjonalnie).
- Higiena na co dzień – tapicerka skóropodobna lub winylowa o podwyższonej odporności na ścieranie; łatwa do dezynfekcji.
- Praktyczne dodatki w zestawie – podgłówek oraz wieszak na papier do ochrony powierzchni roboczej.
- Estetyka wnętrza – szeroka paleta kolorów tapicerki; leżanka komponuje się z nowoczesnymi i klasycznymi aranżacjami.
- Jakość potwierdzona – produkt wyprodukowany w Polsce i wpisany do rejestru wyrobów medycznych.

Zastosowania


- zabiegi kosmetyczne twarzy i ciała,
- masaż relaksacyjny i pielęgnacyjny,
- zabiegi fizykoterapii i podstawowe badania w placówkach medycznych,
- strefy SPA & wellness.

Materiały i pielęgnacja

- Tapicerka skóropodobna/winylowa: czyścić miękką ściereczką z roztworem łagodnego środka myjącego; unikać rozpuszczalników i chloru.
- Drewno: przecierać suchą lub lekko wilgotną ściereczką; okresowo stosować preparaty do pielęgnacji drewna.

Dane techniczne

- Długość 190 cm
- Szerokość 70 cm
- Wysokość 55 / 65 / 75 cm (do wyboru)
- Regulacja zagłówek 0° do +45°
- Dopuszczalne obciążenie 200 kg
- Waga 32 kg
- Wyposażenie opcjonalne; podgłówek, wieszak na papier, półka podbłatowa
- Tapicerka skóropodobna / winylowa, różne kolory
- Kraj produkcji Polska
- Status wpis do rejestru wyrobów medycznych

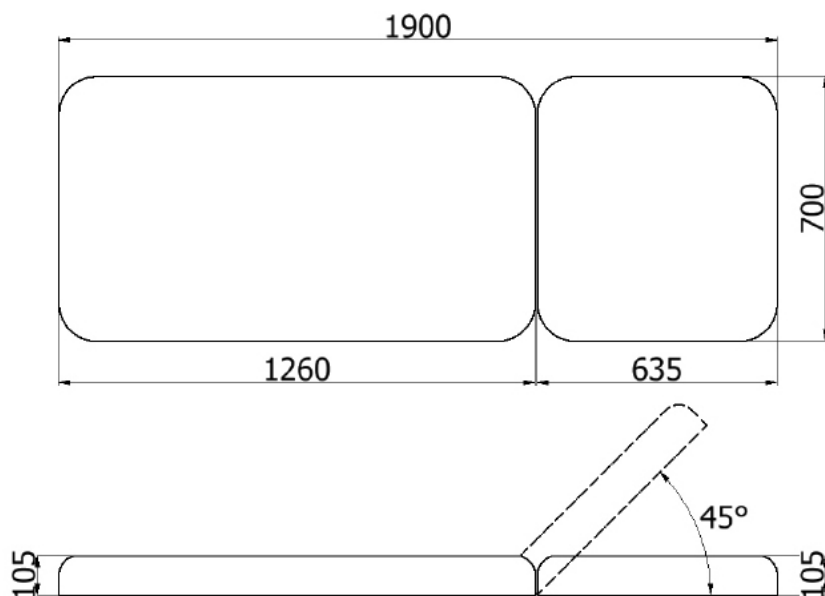

Rysunek techniczny leżanki HERA — wymiary (dł. 190 cm, szer. 70 cm).

Dlaczego warto wybrać „Herę”?

Połączenie stabilnej konstrukcji, ergonomii i łatwej dezynfekcji sprawia, że leżanka spełnia wymagania codziennej pracy w usługach beauty i ochronie zdrowia. To pewny wybór tam, gdzie liczą się komfort pacjenta, płynna organizacja zabiegów i spójna estetyka gabinetu.

FAQ

Czy leżanka nadaje się do gabinetu fizjoterapii?

Tak — stabilność do 200 kg i regulowany zagłówek pozwalają na szeroki zakres podstawowych zabiegów i masażu.

Jak dbać o tapicerkę?

Stosuj delikatne środki myjące, przecieraj po każdym pacjencie. Nie używaj chloru ani rozpuszczalników.

Czy mogę dopasować kolor?

Tak, dostępna jest szeroka gama kolorów tapicerki — łatwo dopasujesz ją do wystroju wnętrza.

Co jest w zestawie?

Leżysko z regulowany zagłówkiem i półka na akcesoria. Pozostałe elementy dostępne jako opcja.

Tapicerka - kolory, właściwości i pielęgnacja.

Tapicerka medyczna – materiał PCW o podwyższonej odporności

Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW, odporny na płyny ustrojowe, oleje, alkohol oraz środki dezynfekcyjne, w tym z aktywnym chlorem. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Najważniejsze cechy:

- Trudnopalność: materiał odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 – test papierosa).
- Odporność mechaniczna: wysoka odporność na rozdarcia (PN-EN ISO 4674-1).
- Odporność na ścieranie: potwierdzona badaniami (PN-EN ISO 5470-2 oraz PN-EN 12947-4).
- Bezpieczeństwo chemiczne: materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych – certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100.

Nie zawiera:

- ftalanów: DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP,
- związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs,
- pierwiastków szkodliwych – zgodnie z EN-71-3,
- lateksu.

Pielęgnacja:

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem dopuszczonym do dezynfekcji materiałów PCW (również z aktywnym chlorem). Unikaj acetonu i silnych rozpuszczalników. Po czyszczeniu osusz do sucha.

Tapicerka Standard Line



Kolorystyka może odbiegać od rzeczywistych kolorów.



Kolory tapicerki

kozetki Hera – próbnik dostępnych wykończeń.

Tapicerka medyczna – winyl o podwyższonej odporności (z PERMABLOK3®, Hi-Loft²™ i SILVERGUARD®)

Materiał winylowy o zastosowaniu medycznym, o zwiększonej odporności na płyny ustrojowe. Posiada antystatyczne wykończenie, odporny na pleśń podkład oraz wzmocnioną warstwę wierzchnią. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

Kluczowe technologie i warstwy

- PERMABLOK3® – ochronna warstwa wierzchnia tworząca skuteczną barierę przeciw bakteriom, ścieraniu i plamom; zapewnia wyjątkową ochronę przed rozwojem grzybów (bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby nitkowate, drożdże).
- Hi-Loft²™ – specjalny, pleciony podkład z włókien 100% poliestrowych; gruby, mocny, nadaje tapicerce charakterystyczną miękkość i trwałość.
- SILVERGUARD® – przyjazna dla środowiska, oparta na jonach srebra ochrona antybakteryjna; ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów i plam, wspiera świeżość i wydłuża cykl życia produktu.

Odporności i normy

- Trudnopalność: PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosa, test zapałki).
- Rozdarcia: EN ISO 4674-1.
- Ścieranie: EN ISO 12947-2.
- Promieniowanie UV: XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479.
- Plamy siarczkowe: podwyższona odporność.
- Niska temperatura: do -23°C.
- Antystatyczne wykończenie; podkład odporny na pleśń.

Bezpieczeństwo

- Materiał nie zawiera ftalanów.
- Zgodny z EN-71-3 (brak pierwiastków szkodliwych).
- Przeznaczony również do zastosowań dla dzieci.

Pielęgnacja

Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką i środkiem do dezynfekcji dopuszczonym dla tapicerek winylowych (zgodnych z warstwą ochronną). Unikaj agresywnych rozpuszczalników; po czyszczeniu osusz powierzchnię.



Winył medyczny: PERMABLOK3® (bariera przeciw bakteriom, plamom i ścieraniu), podkład Hi-Loft²™, ochrona SILVERGUARD®; bez ftalanów, zgodny z EN-71-3.

Pobierz instrukcję pielęgnacji (PDF) – [skaj](#) (PCV) i [winył](#)

Wieszak drewniany, będący wyposażeniem dodatkowym, przystosowany jest wyłącznie do rolek papieru o szerokości 60 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor drewna: buk naturalny , palisander (+ 80,00 zł) , wenge (+ 80,00 zł)

Podglówek prosty J: nie , tak (+ 55,00 zł)

Podglówek regulowany J: nie , tak (+ 89,00 zł)

Wybierz wysokość: 55cm , 65cm , 75cm

Wycięcie na twarz J: nie , tak (+ 69,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)