

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lezanka-szpitalna-p-1569.html>

Leżanka szpitalna



Cena brutto	2 116,00 zł
Cena netto	1 959,26 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LS-R02

Opis produktu

Leżanka szpitalna LS-R02 to mebel medyczny, który zapewnia pacjentom wygodę i bezpieczeństwo podczas leczenia i rehabilitacji w szpitalu. Stelaż leżanki został wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo, co zapewnia nie tylko stabilność, ale również trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Regulacja wysokości stołu jest skokowa, dzięki czemu można szybko i łatwo dostosować leżankę do potrzeb pacjenta. Leżanka posiada trzy częściowe leże z regulowanym podgłówkiem, który regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej, a podnóżek regulowany jest poprzez mechanizm typu rastomat.

Dodatkowo, leżanka może być wyposażona w otwór na twarz i zatyczkę, co jest szczególnie przydatne w przypadku pacjentów, którzy wymagają leczenia w pozycji leżącej na brzuchu. Regulacja kąta podgłówka wynosi od -70° do 45°, a kąta podnóżka od 0° do 30°, co umożliwi wygodne ustawienie pacjenta w różnych pozycjach.

Leżanka szpitalna LS-R02 ma długość 190 cm i szerokość do wyboru 55 lub 70 cm, co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb i wymagań. Masa własna leżanki wynosi 37 kg, a maksymalne obciążenie to 150 kg, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę pacjentom o różnej wadze ciała.



Leżanka szpitalna, cechy produktu:

- konstrukcja wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo
- trzyczęściowe leże
- regulacja wysokości w zakresie od 55 do 70 cm
- stabilna i lekka
- tapicerka łatwa w czyszczeniu
- regulacja podgłówka za pomocą sprężyny gazowej
- regulacja podnóżka poprzez mechanizm rastomat
- szeroki wybór kolorów

Leżanka szpitalna, parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: od 55 cm do 70 cm (opcjonalnie)

- szerokość: 55 lub 70 cm (opcjonalnie)
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od - 70° do +45°
- regulacja kąta podnóżka: 0° do 30°
- waga: 37 kg
- **maksymalne obciążenie: 150 kg lub wersja PLUS 220kg**

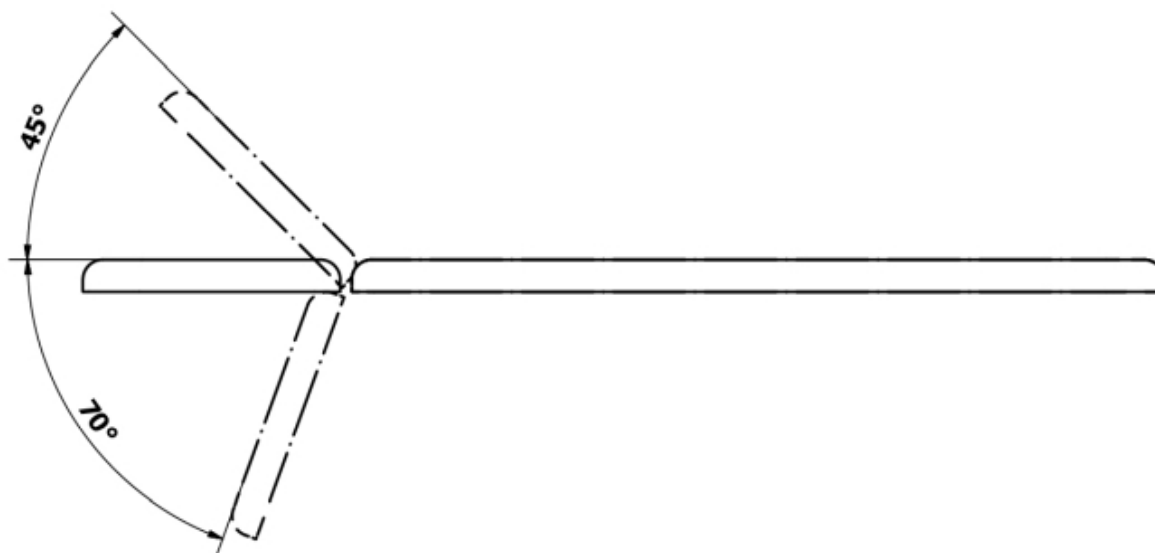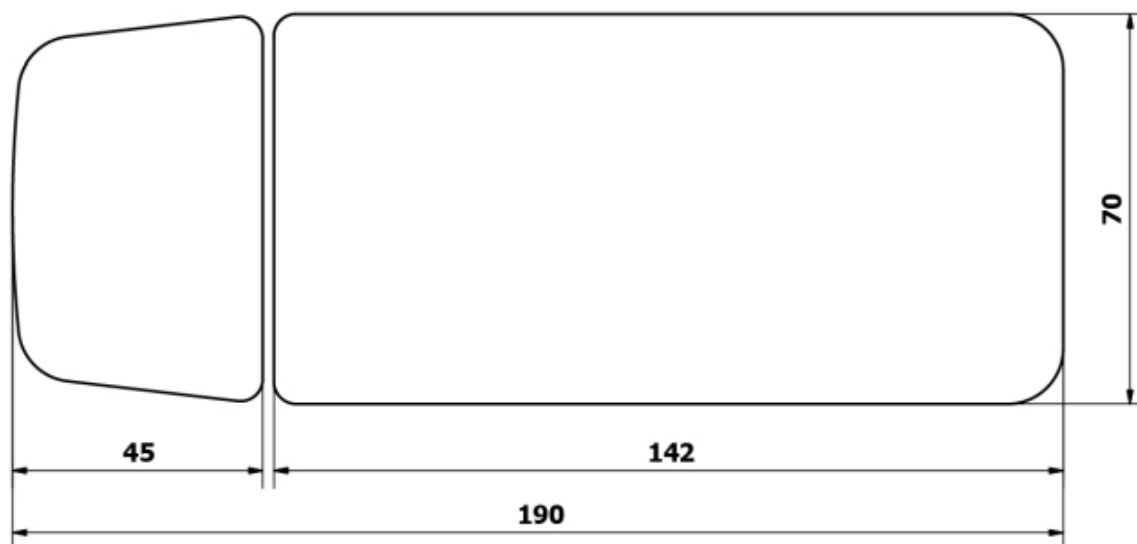

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półka dolna metalowa WS: nie , tak (+ 141,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wieszak metalowy na papier WS: nie , tak (+ 110,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 65,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak