

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-przeciwdleżynowy-zmiennociśnieniowy-babelkowy-p-6.html>



Materac przeciwdleżynowy zmiennociśnieniowy bąbelkowy

Cena brutto **189,00 zł**

Cena netto **175,00 zł**

Dostępność

EXPRESS
WYSYŁKA
24H

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-TGO-MP-DGC001-1**

Opis produktu

Pneumatyczny materac przeciwdleżynowy zmiennociśnieniowy z kompresorem elektrycznym składa się z wielu komór, które są automatycznie i naprzemiennie wypełniane powietrzem. Dzięki temu cyklicznie zmieniają się punkty podparcia osoby na nim leżącej, a ciało pacjenta utrzymywane jest na stałej wysokości. **Materac ten został zaprojektowany specjalnie, aby zapobiegać tworzeniu się odleżyn oraz ułatwić ich leczenie.** Używanie tego materaca **pozwala uniknąć uszkodzenia skóry i mięśni spowodowanego nadmiernym uciskiem ciała.** Wspomaga przepływ krwi w całym organizmie, usprawnia mikrocyrkulację oraz wymianę substancji odżywczych i tlenu pomiędzy systemem krwionośnym, a komórkami ciała. Otóż napełnianie powietrzem oraz regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą pompy zasilanej elektrycznie, która znajduje się w zestawie. Pompa wyposażona jest w uchwyty przy pomocy których można powiesić ją na łóżku oraz stopki wygłuszające, istotne przy zastosowaniu pompy w pozycji leżącej na ziemi. Pompa SOFT WIND III wyposażona jest także w system filtracji pobieranego powietrza. Filtr należy od czasu do czasu przeczyścić, a pompa dzięki temu będzie miała bardzo długą żywotność.

Wyrób posiada deklarację CE i został dopuszczony do obrotu na rynku europejskim jako wyrób medyczny- Produkt Najwyższej Jakości !

Charakterystyczne cechy tego materaca to :

- Płynna regulacja twardości materaca (ciśnienia),
- Materac automatycznie przystosowuje się do pacjenta względem wagi,
- Bardzo cicha praca pompy (Soft Wind III),
- Pompa wyposażona w uchwyty do powieszenia na łóżku,
- Pompa wyposażona w gumowe stopki wyciszające -gdy pompa leży na ziemi,
- System filtracji - wydłużona żywotność pompy,
- Pompa przystosowana do ciągłej pracy
- Przycisk włącz/wyłącz,
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **135 kg**,
- Waga materaca: 2 kg,
- Waga pompy: 1,5 kg,
- Materiał materaca: PVC
- Wymiary materaca: szer. 90 x dł. 200 x wys. 7 cm,

- Czas pełnego cyklu: 12 min,
- Zasilanie: AC 220V 50/60 Hz 0,1A
- Środowisko pracy: temp.: +10 stopni Celsjusza - 40 stopni Celsjusza,
- Bezpiecznik: T1A 250V,
- Pobór mocy: 9W
- Zakres ciśnienia: 50-105 mmHg,
- Przepływ powietrza: 4-6l/min,
- **Gwarancja 18 miesięcy**

W zestawie znajduje się:



Pompa elektryczna z regulacją ciśnienia



Karta gwarancyjna + instrukcja




Bezpieczniki zapasowe



pompa (widok z boku)



instrukcja na pompie

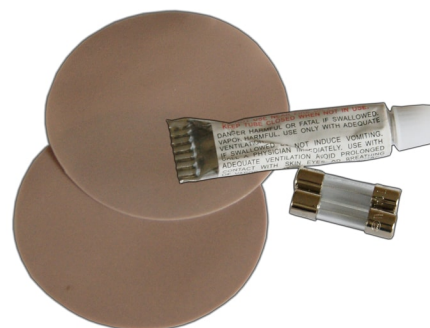

zestaw naprawczy łatki+klej

Na nasze produkty posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.



GM-entente s.p. z siedzibą w Białku-Białej, przy ul. Karpackiej 24/11, 45-214



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej MDD 93/42/EEC

Firma **GM-entente s.p. z siedzibą w Białku-Białej, przy ul. Karpackiej 24/11, 45-214** (NIP: 142-000-0000)

Deklaruję, że:

System prototypowy model **GM 101-GM7800/C** (zestaw z regulacją ciśnienia model GM 101 oraz materiały: Nylon/PVC model GM 7800/C) spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie sprzętów medycznych 93/42/EEC (MDD), klasa I

Deklaruję, że w/w sprzęt medyczny został wprowadzony do obrotu na podstawie Art. 17 Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC

Data i miejsce wystawienia: Białko, 08.03.2011

Wystawca: Wytchica, Timago International Group Spółka z o.o. i spółka - spółka komandytowa z siedzibą w Białku-Białej przy ul. Karpackiej 24/11, 45-214

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.