

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-pielegnacji-noworodkow-kacperек-szafka-z-wanienka-modul-a-p-2627.html>



Stanowisko do pielęgnacji noworodków KACPEREK (Szafka z wanienką, Moduł A)

Cena brutto	4 100,00 zł
Cena netto	3 796,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	6-8 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-KACPEREK-A
Kod producenta	KACPEREK-A-80-0000-0-N

Opis produktu

Stanowisko do pielęgnacji noworodków KACPEREK (Moduł A) to medyczny mebel sanitarny łączący profilowaną wanienkę z laminatu poliestrowo-szklanego z pojemną, dwudrzwiową szafką. Jest przeznaczony na oddziały neonatologiczne, położnicze oraz pediatryczne i tworzy bezpieczną, higieniczną i komfortową strefę do kąpieli oraz pielęgnacji najmłodszych pacjentów. Konstrukcję zaprojektowano tak, aby ułatwić codzienną pracę personelu medycznego, a jednocześnie zmieścić pieluszki, podkłady i kosmetyki w jednym miejscu.

Wanienka z profilowanym dnem i grawitacyjnym odpływem

Sercem modelu jest **wanienka z laminatu poliestrowo-szklanego z wyprofilowanym dnem**. Głębokość zaprojektowano z naturalnym spadkiem (od 215 mm do 247 mm przy odpływie), dzięki czemu brudna woda samoczynnie i błyskawicznie spływa do kanalizacji. Oznacza to brak zalegających mydlin na dnie, co skraca czas sprzątania i dezynfekcji przed kąpielą kolejnego noworodka. Gładki laminat łatwo utrzymać w sterylności, a w dotyku pozostaje „ciepły”, co ogranicza stres termiczny u dziecka.

Szafka z frontami MDF w palecie RAL

Korpus szafki pod wanienką wykonano z białej, laminowanej płyty meblowej o podwyższonej odporności na wilgoć. Trwałe fronty z płyty MDF mogą zostać **polakierowane na wybrany kolor z palety RAL**, co daje szerokie możliwości aranżacyjne. Zamiast surowego, medycznego chłodu można stworzyć na oddziale ciepłą, przyjazną atmosferę, korzystną dla samopoczucia świeżo upieczonych rodziców.

Cechy i zalety stanowiska KACPEREK

- **grawitacyjny odpływ wody** – profilowane dno ze spadkiem wyręcza personel z ręcznego osuszania wanienki,
- brak mikroszczelin w laminacie zapobiegający namnażaniu się bakterii (szybka dekontaminacja),
- bezpieczny, medyczny materiał o gładkiej strukturze chroniący delikatną skórę noworodka,
- pojemna szafka dwudrzwiowa ułatwiająca organizację i utrzymanie porządku na oddziale,
- **fronty lakierowane w wielu kolorach RAL**, pozwalające zerwać z surowym wyglądem szpitalnym,
- korpus z laminowanej płyty meblowej odpornej na wilgoć,
- stabilne nóżki 100 mm z funkcją dokładnego poziomowania całej konstrukcji,
- wysoki prześwit ułatwiający wjechanie standardowym mopem i dokładne umycie podłogi,
- polski produkt najwyższej jakości (12-miesięczna gwarancja).

Wymiary i specyfikacja techniczna


Szerokość całkowita	800 mm
Głębokość całkowita	580 mm
Wysokość robocza	900 mm
Rodzaj wanianki / głębokość	Laminat poliestrowo-szkłany / głębokość profilowana 215-247 mm
Materiał szafki (korpus)	Płyta meblowa laminowana (biała)
Materiał szafki (fronty)	Lakierowana płyta MDF (paleta RAL)
Podstawa (nóżki)	100 mm (z systemem płynnego poziomowania)

Opcjonalne baterie łazienkowe - Madera i Rosso

UWAGA: wybierając model baterii, prosimy o podanie miejsca przygotowania otworu – centralnie, lewa lub prawa strona wanianki.


Stanowisko KACPEREK można na życzenie wyposażyć w profesjonalną armaturę sanitarną. Proponujemy dwa modele dopasowane do specyfiki wanianki: **Madera** (stała, wysoka wylewka) oraz **Rosso** (wylewka wyciągana ze słuchawką prysznicową). Szafka jest fabrycznie przygotowana do ich montażu.

Bateria MADERA (stała, wysoka wylewka)

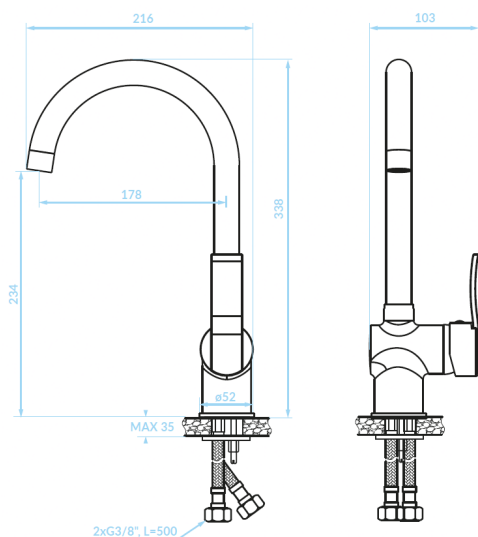

- **Wykończenie:** chrom
- **Montaż:** stojący
- **Typ mieszacza:** jednouchwytowa
- **Rodzaj wylewki:** ruchoma
- **Średnica głowicy:** 40 mm
- **Rodzaj głowicy:** ceramiczna
- **Zasięg wylewki:** 178 mm
- **Wysokość całkowita:** 338 mm
- **Aerator:** standard
- **Wężyki przyłączeniowe:** 50 cm
- **Grupa akustyczna:** I – ≤ 20 dB
- **Klasa przepływu:** A – ≤ 15 l/min

Bateria ROSSO (wyciągana wylewka ze słuchawką)

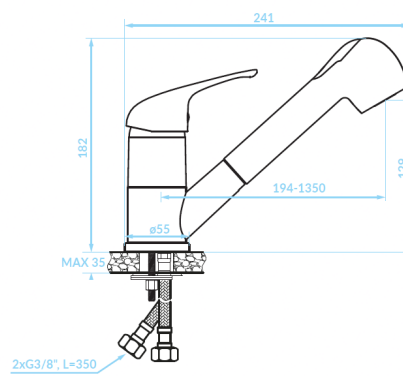

- **Wykończenie:** chrom
- **Montaż:** stojący
- **Typ mieszacza:** jednouchwytowa
- **Rodzaj wylewki:** wyciągana
- **Średnica głowicy:** 40 mm
- **Rodzaj głowicy:** ceramiczna
- **Zasięg wylewki:** 194-1350 mm
- **Wysokość całkowita:** 182 mm
- **Aerator:** standard
- **Wężyki przyłączeniowe:** 40 cm
- **Grupa akustyczna:** I – ≤ 20 dB
- **Klasa przepływu:** A – ≤ 15 l/min

* Moduł A może stanowić samodzielne stanowisko lub łączyć się w większą zabudowę linii KACPEREK.

1. W jaki sposób profilowane dno wanianki (spadek 215-247 mm) pomaga w codziennej pracy?
Spadek w kierunku odpływu to realna ulga czasowa i fizyczna dla personelu. W całkowicie płaskich waniankach woda zalega na dnie wraz z resztkami płynów do kąpieli i złuszczonego naskórkiem, co wymusza ręczne wycieranie i „przepychanie” wody do syfonu. W profilowanej waniu grawitacja robi to za nas – brudna woda płynnie opuszcza stanowisko, a położna może w

pełni skupić się na bezpiecznym wytarciu i ubraniu noworodka.

2. Czy laminat poliestrowo-szkłany jest bezpieczny dla wrażliwej skóry noworodka?

Tak, to materiał powszechnie i od lat stosowany w medycynie. Tworzy jednolitą, gładką i „ciepłą” w dotyku powierzchnię, co redukuje stres termiczny u dziecka podczas wkładania go do wianienki. Brak mikroszczelin zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń biologicznych, co gwarantuje sterylne warunki przed każdą kąpielą.

3. Czy bateria wchodzi w skład zestawu?

Nie – bateria jest wyposażeniem opcjonalnym, dobieranym osobno. Szafka jest jednak fabrycznie przygotowana do montażu armatury. Oferujemy dwa dedykowane modele: Madera (stała wylewka) oraz Rosso (wylewka wyciągana ze słuchawką). Można też zamontować własną armaturę zgodną z normami oddziału – wiele szpitali wymaga baterii bezdotykowych lub łokciowych z termostatem zapobiegającym poparzeniom dziecka.

4. Czy szafka z płyty meblowej nie spuchnie od rozchlapanej wody?

Korpus wykonano z wysokiej jakości płyty laminowanej, a fronty z płyty MDF, która jest dodatkowo lakierowana.

Wielowarstwowy lakier zamyka pory materiału i tworzy barierę ochronną. Rozlaną wodę należy oczywiście przetrzeć, jednak meble są technologicznie przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności na oddziałach.

5. Czy 100 mm prześwitu pod szafką wystarcza do utrzymania czystości posadzki?

Tak. Nóżki o wysokości 100 mm dobrano tak, aby umożliwić swobodne wjechanie pod szafkę standardowym mopem płaskim. Zapobiega to powstawaniu ciemnych, wilgotnych i trudno dostępnych zakamarków pod meblami, w których mogłyby rozwijać się grzyby i pleśń.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz baterię: BRAK , STAŁA WYLEWKA (+ 400,00 zł) , WYCIĄGANA WYLEWKA (+ 400,00 zł)

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary