

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pionizacji-nsr-p-p-109.html>

Stół do pionizacji NSR-P



Cena brutto	9 016,00 zł
Cena netto	8 348,15 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-SP-NSR-P

Opis produktu


Prezentowany stół jest stołem elektrycznym i przeznaczony jest do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Może być także stosowany do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym. Ponadto stół ten umożliwia przeprowadzenie masażu klasycznego i segmentowego, masażu suchego leczniczego oraz masażu sportowego całkowitego i częściowego. Konstrukcja stołu została wykonana ze stali i wyposażona jest w jezdne kółka z blokadą, które umożliwiają łatwe przemieszczanie stołu przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas pracy. Dodatkową zaletą tego stołu jest elektryczna zmiana wysokości oraz kąta nachylenia leżyska. Regulacja kąta nachylenia oraz wysokości leżyska odbywa się za pomocą dwóch siłowników elektrycznych, które sterowane są pilotem. Dzięki tej regulacji stół ten umożliwia szybką, łatwą i płynną zmianę położenia pacjenta. Stół został także wyposażony w trzy pasy do stabilizacji pacjenta. Istotnym elementem jest blat stołu, który pokryty został materiałem skóropodobnym. Tapicerka ta jest łatwa do utrzymania w czystości i dostępna w szerokiej gamie kolorów.

Cechy stołu, wyposażenie standardowe:

- blat jednoczęściowy
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- system jezdny z 4 skrętnymi kółkami z hamulcem
- pilot ręczny do regulacji wysokości oraz kąta nachylenia leża
- szybka, łatwa i płynna zmiana położenia
- stalowa konstrukcja malowana proszkowo
- stabilny i wytrzymały
- blat łatwy do utrzymania w czystości
- zapewnia bezpieczeństwo

Wyposażenie opcjonalne:

- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości
- stolik do ćwiczeń

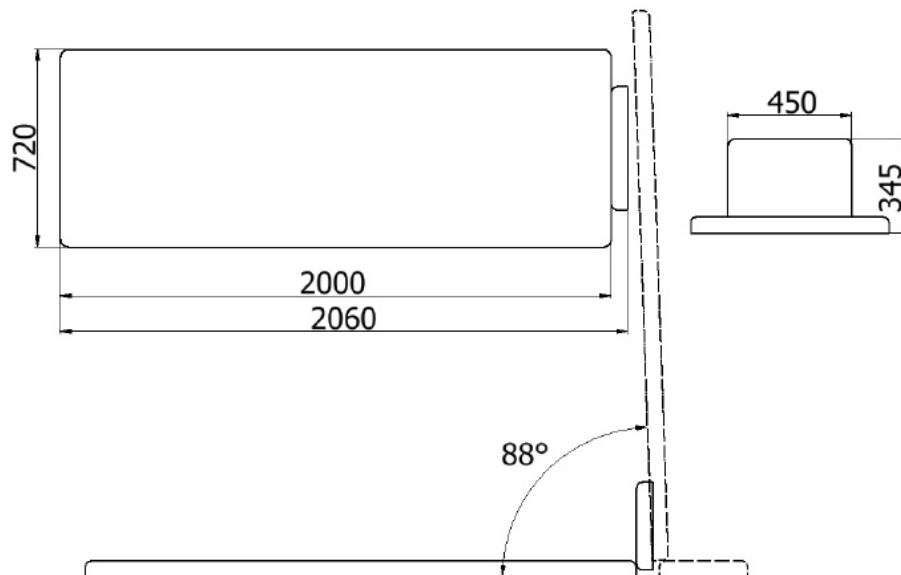

Parametry techniczne:

- długość: 206 cm
- szerokość: 72 cm
- wysokość: od 71 cm do 97 cm
- waga: 116 kg
- regulacja kąta nachylenia leża: od 0 ° do +88 °
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stolik do ćwiczeń: nie , tak (+ 434,00 zł)

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł) , 102 (+ 120,00 zł) , 106 (+ 120,00 zł) , 107 (+ 120,00 zł) , 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)