

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-dla-pacjentow-neurologicznych-p-648.html>



Wózek inwalidzki dla pacjentów neurologicznych

Cena brutto	1 965,00 zł
Cena netto	1 819,44 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-ALH 008

Opis produktu

Prezentowany wózek inwalidzki przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych motorycznie i osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się.

Wózek inwalidzki dla pacjentów neurologicznych pełni on nie tylko funkcję lokomocyjną lecz również stabilizacyjną czyli utrzymuje ciało użytkownika w odpowiedniej pozycji. W porównaniu do poprzednich wózków inwalidzkich ten wózek posiada przedłużone oparcie, dlatego jeszcze lepiej stabilizuje pozycję osoby siedzącej. Dodatkowym atutem tego produktu jest zagłówek zapinany na rzepy, dlatego można dostosować jego położenie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Może być używany zarówno w warunkach domowych jak i w szpitalach, przychodniach czy hospicjach.


Jego lekka, stalowa, składana rama (krzyżak) sprawia, że jest on łatwy i komfortowy w użyciu. Siedzisko dostępne w kolorze czarnym lub kratę bardzo wytrzymałe i odporne na rozciąganie.

Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej wejście jak i zejście z wózka, podłokietniki zaprojektowano w taki sposób, aby można było je łatwo zdjąć natomiast podnóżki z regulacją kąta uchylić lub zdjąć.

Wózek posiada duże 24-calowe, pompowane gumowe koła, tylne i pełne, grube 8-calowe przednie koła, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej samodzielne przemieszczanie się, a zastosowanie w tylnej części oparcia rączek pozwala na prowadzenie wózka przez drugą osobę.

Elementy wózka:

- a. uchwyt
- b. hamulec bębnowy dla osoby prowadzącej
- c. funkcja kąta nachylenia oparcia
- d. podłokietnik
- e. pokrętło montażowe
- f. hamulec postojowy
- g. śruba mocująca stabil. poprzeczną
- h. ciąg napędowy
- i. podparcie pod łydkę
- j. podnózek
- k. dźwignia podnóżka
- l. bolec montowania podnóżka

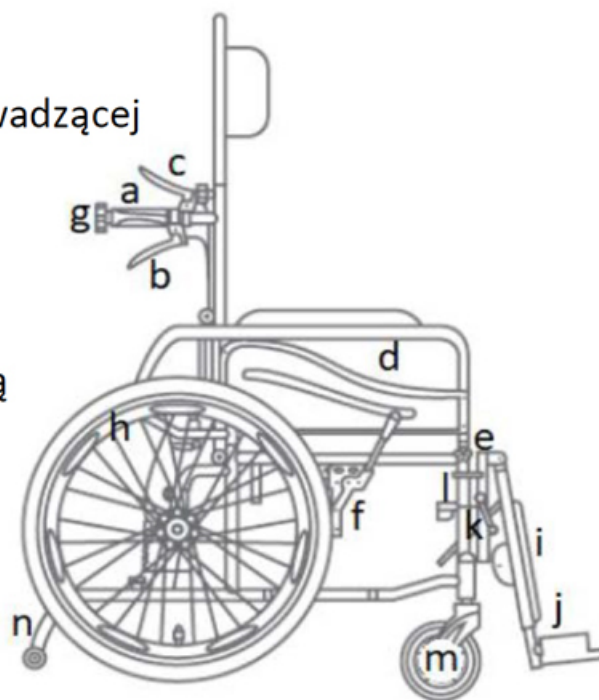

Wózek inwalidzki dla pacjentów neurologicznych, cechy:

- z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem,
- posiada dodatkową stabilizację poprzeczną przy uchwytach dla osoby prowadzącej,
- oparcie i siedzisko nylonowo - bawełniane,
- siedzisko dodatkowo wymiękczane,
- pokrowce wykonane z tkaniny umożliwiającej przepływ powietrza,
- wyposażony w przedłużenie oparcia,
- wyposażony w poduszkę pod głowę,
- wyposażony w kółka anty-wywrotne,
- wyposażony w hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej,
- funkcja regulacji kąta nachylenia oparcia od 0 - 90 stopni,
- regulowane pod kątem podnóżki,
- długie podłokietniki mają funkcję demontażu,
- koła tylne pompowane 24" z plastikowym ciągiem,
- pełne koła przednie 8", gumowe o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie,
- napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą,
- wykorzystywany wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń,
- dedykowany dla pacjentów: z paraliżem, porażeniami mózgowymi, uszkodzeniami kończyn, amputacjami, zwyrodnieniami, deformacjami kończyn, chorobami serca i naczyń, zaburzeniami krążenia, nadwagą lub chorobliwą niedowagą,
- zestaw zawiera: **ramę wózka wraz z siedziskiem, prawy podnózek wraz z płytą podnóżka, lewy podnózek wraz z płytą podnóżka, zagłówek, tapicerkę z poduszką stabilizującą głowę, pompkę, zestaw kluczy.**

Co wyróżnia prezentowany wózek:

FUNKCJA REGULACJI OPARCIA - wózek ten ma przedłużone oparcie z funkcją regulacji kąta nachylenia od 0 - 90 stopni. Takie rozwiązanie umożliwia pacjentom przebywanie w pozycji leżącej i półleżącej, ułatwiające w ten sposób odpoczynek, niwelując jednocześnie napięcie mięśni.

BEZPIECZEŃSTWO - wózek gwarantuje komfortową i bezpieczną jazdę. Wyposażony on został w koła anty-wywrotne, zagłówek zapinany na rzepy, pasy stabilizujące i przedłużone oparcie.

SOLIDNA, STABILNA KONSTRUKCJA - wózek inwalidzki wykonany jest w wysokiej jakości aluminiowej ramy, którą dodatkowo wzmocniono wytrzymałą, podwójną konstrukcją krzyżakową.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA - do konstrukcji tego wózka inwalidzkiego zastosowano materiały odporne na zanieczyszczenia oraz wodę. Dzięki zastosowaniu tylnych, pompowanych kół, użytkownik będzie czuł się komfortowo w trakcie

jazdy na każdej nawierzchni.

Wózek inwalidzki dla pacjentów neurologicznych, dane techniczne:

- rama - ALUMINIOWA
- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej - TAK
- sposób składania wózka - SKŁADANY NA PODWÓJNYM KRZYŻAKU
- funkcja regulacji środka ciężkości - TAK NA PRZEDNICH KOŁACH
- poduszka piankowa - NIE
- odpinana tapicerka - NIE
- poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
- ciągi - PLASTIKOWE
- podnóżki- UCHYLNE REGULOWANE POD KĄTEM
- szybkozłączka - NIE
- kieszeń na drobiazgi - NIE
- hamulec postojowy - TAK
- podłokietniki- Z FUNKCJĄ DEMONTAŻU
- zagłówek zapinany na rzepy - TAK
- wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
- pas dla użytkownika - TAK - CZTEROPUNKTOWY
- kółka anty-wywrotne regulowane - TAK
- rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 22"
- rodzaj kół przednich - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 8"
- kolor ramy - SREBRNY
- kolor tapicerki - BEŻOWO-BRĄZOWY, CZARNO-SZARY
- rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
- maksymalna waga użytkownika - 100 kg dla rozmiaru siedziska 46 cm lub 120 kg dla rozmiaru siedziska 120 kg
- możliwość składania - TAK
- waga wózka - 19,3 - 21,8 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki wózka: brak , beżowo-brązowy , czarno-szary

Szerokość siedziska: 41 cm , 46 cm